

Shower benches

All our shower benches are ideal for usage in the shower, bathtub, bathroom or other humid environments. The specially designed rubbers at the end of each leg will create a safe stability for the bench and avoid the sliding of the bench.

All models have leg adjustments. You can easily adjust the length of the legs by pressing the snap buttons and sliding the tube in- or outwards. Make sure the snap button securely locks into the hole. Ensure that all four legs are of the same height before using your shower bench.

Ask assistance if you are uncertain on the usage of your product.

Users weight: 150 kg

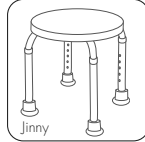
The shower benches can be cleaned with normal household cleaning products. Avoid using aggressive cleaning products which can cause discoloration.

Dimensions Jill

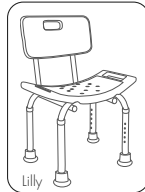
width: 51 cm
length: 42 cm
seat height: 35 - 53 cm
seat width: 51 cm
leg adjustment: 15 cm
weight: 2 kg

**Dimensions Jinny**

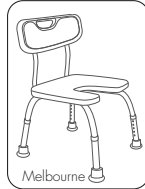
width: 35 cm
length: 35 cm
seat height: 33 - 51 cm
seat width: 32 cm
leg adjustment: 15 cm
weight: 1,5 kg

**Dimensions Lilly**

width: 51 cm
length: 47 cm
height: 77 - 87 cm
height backrest: 38 cm
seat width: 51 cm
seat height: 36 - 46 cm
leg adjustment: 15 cm
weight: 3 kg

**Dimensions Melbourne**

width: 48 cm
length: 56 cm
height: 72 - 82 cm
height backrest: 37 cm
seat width: 41 cm
seat height: 34 - 44 cm
leg adjustment: 15 cm
weight: 2,8 kg

**Dimensions Sidney**

width: 50 cm
length: 52 cm
seat height: 34 - 44 cm
seat width: 41 cm
leg adjustment: 15 cm
weight: 2 kg



Subject to technical alterations. © 2016

VERMEIREN

Opening up new horizons in mobility



Douchestoel

Al onze douchestoelen zijn ideaal voor gebruik in de douche, bad, badkamer en andere vochtige omgevingen. De speciaal ontworpen rubbers aan de uiteinden van de poten zorgen voor een veilige stabiliteit van de douchestoelen en vermijden dat de stoel gaat verschuiven.

De poten van alle douchestoel modellen kunnen aangepast worden in hoogte. De hoogte kan eenvoudig worden aangepast door op de drukknoppen te drukken en de buis naar binnen of naar buiten te schuiven. Zorg ervoor dat de drukknoppen vergrendeld zitten in de openingen. Zorg ervoor dat alle poten van gelijke lengte zijn alvorens uw douchestoel te gebruiken.

Vraag assistentie indien u onzeker bent over het gebruik van uw douchestoel.

Gebruikersgewicht: 150 kg

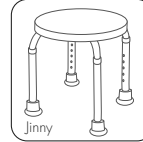
De douchestoelen kunnen gereinigd worden met normale huishoud reinigingsmiddelen. Vermijd agressieve reinigingsproducten daar deze schade of verkleuring kunnen veroorzaken.

Afmetingen Jill

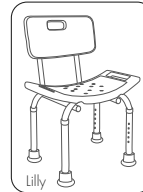
breedte: 51 cm
lengte: 42 cm
zithoogte: 35 - 53 cm
zitbreedte: 51 cm
poot verstelling: 15 cm
gewicht: 2 kg

**Afmetingen Jinny**

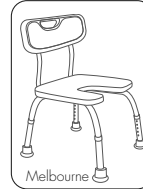
breedte: 35 cm
lengte: 35 cm
zithoogte: 33 - 51 cm
zitbreedte: 32 cm
poot verstelling: 15 cm
gewicht: 1,5 kg

**Afmetingen Lilly**

breedte: 51 cm
lengte: 47 cm
hoogte: 77 - 87 cm
rug hoogte: 38 cm
zitbreedte: 51 cm
zithoogte: 36 - 46 cm
poot verstelling: 15 cm
gewicht: 3 kg

**Afmetingen Melbourne**

breedte: 48 cm
lengte: 56 cm
hoogte: 72 - 82 cm
rughoogte: 37 cm
zitbreedte: 41 cm
zithoogte: 34 - 44 cm
poot verstelling: 15 cm
gewicht: 2,8 kg

**Afmetingen Sidney**

breedte: 50 cm
lengte: 52 cm
zithoogte: 34 - 44 cm
zitbreedte: 41 cm
poot verstelling: 15 cm
gewicht: 2 kg



Vorbehouden technische wijzigingen. © 2016

VERMEIREN

Grensverleggend in mobiliteit



Bancs de douche

Tous nos accessoires de bain sont idéalement conçus pour la douche, baignoire, salle de bain et autres endroits humides. Les embouts en caoutchouc fixés sur chaque pied rendent le produit stable et antidérapant.

Tous les modèles sont réglables en hauteur. Vous pouvez facilement ajuster la hauteur des pieds par une simple pression sur le bouton ressort. Après réglage, assurez-vous que le bouton ressort est correctement enclenché dans le trou correspondant à votre réglage. Faites cette vérification pour chaque pied du produit avant toute utilisation.

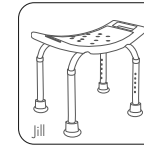
Demandez de l'aide à votre entourage si vous n'êtes pas certain du fonctionnement du produit.

Poids maxi utilisateur : 150 kg

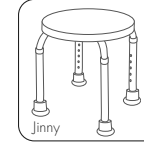
Les accessoires de bain peuvent être facilement nettoyés avec des produits classiques d'entretien. Évitez les produits nettoyant agressifs qui pourraient entraîner la décoloration du produit.

Caractéristiques Jill

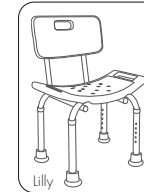
largeur: 51 cm
longueur: 42 cm
hauteur d'assise: 35 - 53 cm
largeur de l'assise: 51 cm
réglage des pieds: 15 cm
poids: 2 kg

**Caractéristiques Jinny**

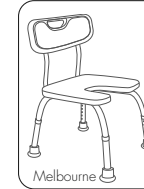
largeur: 35 cm
longueur: 35 cm
hauteur d'assise: 33 - 51 cm
largeur de l'assise: 32 cm
réglage des pieds: 15 cm
poids: 1,5 kg

**Caractéristiques Lilly**

largeur: 51 cm
longueur: 47 cm
hauteur: 77 - 87 cm
hauteur dossier: 38 cm
largeur de l'assise: 51 cm
hauteur d'assise: 36 - 46 cm
réglage des pieds: 15 cm
poids: 3 kg

**Caractéristiques Melbourne**

largeur: 48 cm
longueur: 56 cm
hauteur : 72 - 82 cm
hauteur dossier: 37 cm
largeur de l'assise: 41 cm
hauteur d'assise: 34 - 44 cm
réglage des pieds: 15 cm
poids: 2,8 kg

**Caractéristiques Sidney**

largeur: 50 cm
longueur: 52 cm
hauteur d'assise: 34 - 44 cm
largeur de l'assise: 41 cm
réglage des pieds: 15 cm
poids: 2 kg



Sous réserve de modifications techniques. © 2016

VERMEIREN

Pour plus de mobilité



Badewannen-Einstieghilfe

Unsere Duschhocker eignen sich für die Nutzung in Duschen, Badewannen oder ähnlichen Umgebungen. Die Gummifüße sind speziell dafür geeignet sicheren Halt auch auf rutschigen Untergründen zu gewährleisten.

Alle Modelle sind höhenverstellbar. Drücken Sie den Druckknopf an den Beinen des Stuhls und ziehen/schieben Sie die Fußröhre in die gewünschte Position. Achten Sie darauf, dass die Druckknöpfe anschließend wieder sicher in den Arretierungslöchern einrasten bevor Sie Ihren Duschhocker nutzen.

Bitten Sie um Hilfe, wenn Sie unsicher bei der Nutzung des Duschhockers sind.

Max. Benutzergewicht: 150 kg

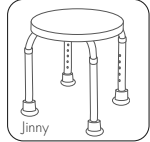
Für die Reinigung der Duschhocker sind nur handelsübliche Haushaltsreiniger zu verwenden. Vermeiden Sie aggressive Reiniger, die zu Verfärbungen führen können.

Abmessungen Jill

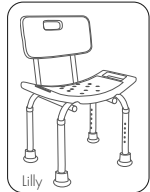
Breite: 51 cm
Länge: 42 cm
Sitzhöhe: 35 - 53 cm
Sitzbreite: 51 cm
Höhenverstellung: 15 cm
Gewicht: 2 kg

**Abmessungen Jinny**

Breite: 35 cm
Länge: 35 cm
Sitzhöhe: 33 - 51 cm
Sitzbreite: 32 cm
Höhenverstellung: 15 cm
Gewicht: 1,5 kg

**Abmessungen Lilly**

Breite: 51 cm
Länge: 47 cm
Höhe: 77 - 87 cm
Rückenhöhe: 38 cm
Sitzbreite: 51 cm
Sitzhöhe: 36 - 46 cm
Höhenverstellung: 15 cm
Gewicht: 3 kg

**Abmessungen Melbourne**

Breite: 48 cm
Länge: 56 cm
Höhe: 72 - 82 cm
Rückenhöhe: 37 cm
Sitzbreite: 41 cm
Sitzhöhe: 34 - 44 cm
Höhenverstellung: 15 cm
Gewicht: 2,8 kg

**Abmessungen Sidney**

Breite: 50 cm
Länge: 52 cm
Sitzhöhe: 34 - 44 cm
Sitzbreite: 41 cm
Höhenverstellung: 15 cm
Gewicht: 2 kg



Technische Änderungen vorbehalten. © 2016

VERMEIREN

Ihre Mobilität ist unser Anliegen



Sedie da doccia

Tutte le nostre sedie da doccia sono ideali per l'utilizzo nella doccia e nella vasca da bagno. Le speciali ventose posizionate sulle gambe creano una sicura stabilità evitando lo scivolamento delle sedie da doccia.

Tutti i modelli hanno la regolazione delle gambe in altezza. Possono essere facilmente regolate premendo i pulsanti a scatto e facendo scorrere i tubi che devono essere posizionati alla stessa altezza prima dell'utilizzo della sedia.

⚠ Chiedete informazioni al vostro rivenditore se non siete sicuri sull'utilizzo del prodotto.

⚠ Peso utilizzatore: 150 kg

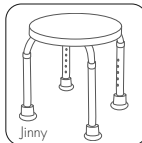
Le sedie da doccia possono essere pulite con un normale prodotto per la pulizia. Non utilizzate prodotti aggressivi che possono causare decolorazioni del prodotto.

Dimensioni Jill

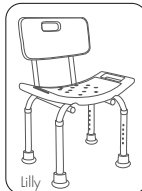
larghezza: 51 cm
lunghezza: 42 cm
altezza sedile: 35 - 53 cm
larghezza sedile: 51 cm
regolazione dell'altezza: 15 cm
peso: 2 kg

**Dimensions Jinny**

larghezza: 35 cm
lunghezza: 35 cm
altezza sedile: 33 - 51 cm
larghezza sedile: 32 cm
regolazione dell'altezza: 15 cm
peso: 1,5 kg

**Dimensions Lilly**

larghezza: 51 cm
lunghezza: 47 cm
altezza: 77 - 87 cm
altezza schienale: 38 cm
larghezza sedile: 51 cm
altezza sedile: 36 - 46 cm
regolazione dell'altezza: 15 cm
peso: 3 kg

**Dimensions Melbourne**

larghezza: 48 cm
lunghezza: 56 cm
altezza: 72 - 82 cm
altezza schienale: 37 cm
larghezza sedile: 41 cm
altezza sedile: 34 - 44 cm
regolazione dell'altezza: 15 cm
peso: 2,8 kg

**Dimensions Sidney**

larghezza: 50 cm
lunghezza: 52 cm
altezza sedile: 34 - 44 cm
larghezza sedile: 41 cm
leg adjustment: 15 cm
peso: 2 kg



Modifiche tecniche riservate. © 2016

VERMEIREN
Mobilità illimitata



Bancos de ducha

Todos nuestros bancos de ducha son ideales para su uso en la ducha, la bañera, el baño u otros lugares húmedos. Las gomas de los extremos de las patas hacen que el banco sea muy estable y no se resbale.

La longitud de las patas puede ajustarse en todos los modelos. Sólo hay que pulsar los botones de presión y deslizar el tubo hacia dentro o hacia fuera. Asegúrese de que el botón de presión queda fijado en el orificio. Compruebe también que las cuatro patas están a la misma altura antes de utilizar el banco.

⚠ Pida ayuda si no está seguro de cómo utilizar el producto.

⚠ Peso soportado: 150 kg

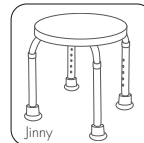
Los bancos de ducha pueden limpiarse con productos de limpieza normales. No utilice sustancias agresivas que puedan dañar los colores.

Dimensiones Jill

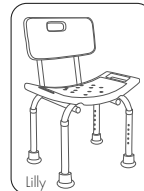
anchura: 51 cm
longitud: 42 cm
altura del asiento: 35 - 53 cm
anchura del asiento: 51 cm
ajuste de las patas: 15 cm
peso: 2 kg

**Dimensiones Jinny**

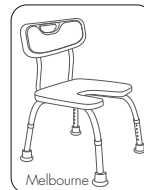
anchura: 35 cm
longitud: 35 cm
altura del asiento: 33 - 51 cm
anchura del asiento: 32 cm
ajuste de las patas: 15 cm
peso: 1,5 kg

**Dimensiones Lilly**

anchura: 51 cm
longitud: 47 cm
altura: 77 - 87 cm
altura del respaldo: 38 cm
anchura del asiento: 51 cm
altura del asiento: 36 cm
ajuste de las patas: 15 cm
peso: 3 kg

**Dimensiones Melbourne**

anchura: 48 cm
longitud: 56 cm
altura: 72 - 82 cm
altura del respaldo: 37 cm
anchura del asiento: 41 cm
altura del asiento: 34 - 44 cm
ajuste de las patas: 15 cm
peso: 2,8 kg

**Dimensiones Sidney**

anchura: 50 cm
longitud: 52 cm
altura del asiento: 34 - 44 cm
anchura del asiento: 41 cm
ajuste de las patas: 15 cm
peso: 2 kg



Abriendo nuevos horizontes en movilidad. © 2016

VERMEIREN
Para más movilidad



Krzesła prysznicowe

Wszystkie nasze krzesła prysznicowe idealnie nadają się do użytku pod prysznicem, w wannie, w łazienkach i innych wilgotnych pomieszczeniach. Specjalnie zaprojektowane gumy na końcówkach nóg gwarantują stabilność krzesełek oraz skutecznie przeciwdziałają poślizgowi.

Wszystkie modele mają regulowaną wysokość nóg. Aby ustawić odpowiednią długość nóg, należy nacisnąć odpowiedni przycisk i wsunąć lub wysunąć ruchomą część. Upewnij się, że przyciski są pewnie osadzone w otworach. Przed stosowaniem sprawdź, czy wszystkie cztery nogi mają tą samą długość.

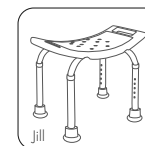
⚠ Poproś o pomoc w przypadku, jeśli nie wiesz jak korzystać z produktu.

⚠ Waga użytkownika: 150 kg

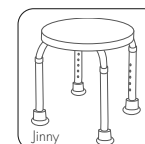
Do czyszczenia krzesełek należy używać ogólnodostępnych, domowych środków czyszczących. Nie używać preparatów żrących, które mogą spowodować uszkodzenia i odbarwienia.

Wymiary Jill

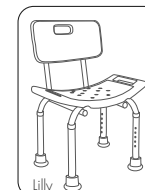
szerokość: 51 cm
długość: 42 cm
wysokość siedziska: 35 - 53 cm
szerokość siedziska: 51 cm
regulacja nóg: 15 cm
waga: 2 kg

**Wymiary Jinny**

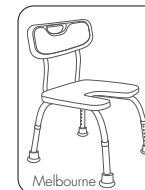
szerokość: 35 cm
długość: 35 cm
wysokość siedziska: 33 - 51 cm
szerokość siedziska: 32 cm
regulacja nóg: 15 cm
waga: 1,5 kg

**Wymiary Lilly**

szerokość: 51 cm
długość: 47 cm
wysokość: 77 - 87 cm
Wysokość oparcia: 38 cm
szerokość siedziska: 51 cm
wysokość siedziska: 36 - 46 cm
regulacja nóg: 15 cm
waga: 3 kg

**Wymiary Melbourne**

szerokość: 48 cm
długość: 56 cm
wysokość: 72 - 82 cm
Wysokość oparcia: 37 cm
szerokość siedziska: 41 cm
wysokość siedziska: 34 - 44 cm
regulacja nóg: 15 cm
waga: 2,8 kg

**Wymiary Sidney**

szerokość: 50 cm
długość: 52 cm
wysokość siedziska: 34 - 44 cm
szerokość siedziska: 41 cm
regulacja nóg: 15 cm
waga: 2 kg



Zastrzegamy sobie możliwość zmiany niektórych parametrów. © 2016

VERMEIREN
Tworzymy nowe możliwości



Sedačka do sprchy

Všechny naše sprchová sedátka jsou ideální pro použití ve sprše, vaně, koupelně či jiných vlhkých prostředích. Zvláště navržené pryžové prvky na konci každé nožky zajišťují bezpečnou stabilitu sedátka a zamezují jejímu sklouznutí.

Všechny modely mají nastavitelné nožky. Délku nožek lze snadno nastavit stiskem začvakačacích tlačítek a vysunutím / zasunutím trubek. Ujistěte se, že začvakačací tlačítko bezpečně zapadne do otvoru. Před použitím sprchového sedátka se ujistěte, že má všechny čtyři nožky stejnou výšku.

⚠ Pokud si nejste jisti způsobem používání výrobku, požádejte o pomoc.

⚠ Hmotnost uživatele: 150 kg

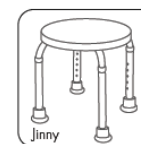
Sprchové sedátko lze snadno čistit běžnými čistícími prostředky pro domácnost. Nepoužívejte agresivní čistící prostředky, které mohou způsobovat změnu barvy výrobku.

Rozměry Jill

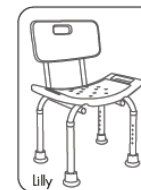
Šířka: 51 cm
Délka: 42 cm
Výška sedačky: 35 - 53 cm Šířka sedačky: 51 cm
Seřízení nožek: 15 cm
Hmotnost: 2 kg

**Rozměry Jinny**

Šířka: 35 cm
Délka: 35 cm
Výška sedačky: 33 - 51 cm Šířka sedačky: 32 cm
Seřízení nožek: 15 cm
Hmotnost: 1,5 kg

**Rozměry Lilly**

Šířka: 51 cm
Délka: 47 cm
Výška: 77 - 87 cm
Výška opěrky zad: 38 cm Šířka sedačky: 51 cm
Výška sedačky: 36 - 46 cm Seřízení nožek: 15 cm Hmotnost: 3 kg

**Rozměry Melbourne**

Šířka: 48 cm
Délka: 56 cm
Výška: 72 - 82 cm
Výška opěrky zad: 37 cm Šířka sedačky: 41 cm Výška sedačky: 34 - 44 cm
Seřízení nožek: 15 cm Hmotnost: 2,8 kg

**Rozměry Sidney**

Šířka: 50 cm
Délka: 52 cm
Výška sedačky: 34 - 44 cm Šířka sedačky: 41 cm
Seřízení nožek: 15 cm Hmotnost: 2 kg



Technické změny vyhrazeny. © 2016

VERMEIREN
Otvíráme nové horizonty

