

SEDAČKA DO VANY SE ZÁDOVOU OPĚRKOU

POUŽITÍ:

Sedačka do vany KING s opěrkou zad je navržena tak, aby uživatel nemusel dosedat až na dno vany a byl tak maximálně usnadněn vstup a výstup z vany. Výrazně se tak snižuje riziko únavy a pádu během hygienických procedur vsedě a ve stoje. Sedačka do vany tak zvyšuje nezávislost a soběstačnost uživatele při každodenní osobní hygieně ve vaně. Zádová opěrka zvyšuje pohodlí a především zajišťuje jednodušší a bezpečnější způsob koupání.

INDIKACE A KONTRAINDIKACE:

Sedátko do vany KING poskytuje oporu starším lidem, vozíčkářům, lidem se sníženou pohyblivostí dolních končetin, beder a kyčlí a všem, kteří mají problém si ve vaně sednout a vstát. Pro použití sedačky do vany je nutná schopnost uživatele samostatně sedět. Sedačka do vany se nedoporučuje používat, pokud má uživatel problémy s rovnováhou nebo prostorovým vnímáním.

BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ A DOPORUČENÍ:

- Maximální hmotnost uživatele uvedená v montážním návodu nesmí být překročena.
- Pokud má uživatel problémy s pohyblivostí nebo trpí poruchami rovnováhy, doporučujeme požádat o pomoc při vstupu a výstupu z vany.
- Před každým použitím musí uživatel zkontrolovat stav a neporušenost sedačky vany.
- Při montáži přesně dodržujte to, co je uvedeno v uživatelské příručce.
- Riziko poranění prstů se může zvýšit během kroku výběru šířky při montáži a během procesu instalace na vanu.
- Před každým použitím se ujistěte, že sedačka do vany je na vaně pevně usazena a je stabilní. Koncové pryžové krytky a obdélníkové pryžové lišty na hliníkové podpěře musí být správně nakloněny k rovné hraně, resp. ke straně vany.
- Sedačka do vany a její součásti žádným způsobem neupravujte.
- Sedačku do vany nepoužívejte, pokud je poškozená nebo jakkoli pozměněná. Praskliny a deformace mohou silně ovlivnit výkon a bezpečnost zdravotnického prostředku.
- Během používání se vyhněte polohám, které přenášejí těžiště těla váhu příliš dozadu nebo dopředu. Nesprávná poloha může vést k nestabilitě a převrácení sedátka vany.
- Během sezení a stání se může zvýšit riziko uklouznutí kvůli mokré podlaze.
- Sedačka do vany nesmí být skladována venku.

INFORMACE O ÚDRŽBĚ:

Údržba výrobků spočívá v čištění a sanitaci. Aby bylo zaručeno bezpečné používání a odpovídající hygienický standard, měl by uživatel tyto postupy provést před každým použitím! Uživatel se musí ujistit o konstrukční celistvosti zařízení a jeho součástí a musí být zkontrolováno utažení šroubů. Při čištění a sanitaci postupujte podle následujících kroků:

1. Měly by se nosit rukavice.
2. Před provedením dezinfekce odstraňte zjevné nečistoty.
3. K čištění použijte vodu nebo neagresivní čisticí prostředek.
4. Otřete suchým a čistým hadříkem

Alternativně lze výrobek čistit v domácích myčkách nádobí při maximální teplotě.

POŽADAVKY NA OPĚTOVNÉ POUŽITÍ:


Produkt je vhodný pro opětovné použití jinými uživateli. Před opětovným použitím jinými osobami musí být produkt řádně vyčištěn a dezinfikován. Před předáním produktu jiným osobám musí být produkt zkontrolován kvalifikovanými výdejci.

SPRÁVNÝ POSTUP LIKVIDACE:


Nevyhazujte výrobek do běžného domovního odpadu. Zeptejte se předem místního úřadu na správný a ekologický způsob likvidace.

HLÁŠENÍ NEŽÁDOUCÍ PŘÍHODY:

Pokud došlo k vážné nehodě s tímto zdravotnickým prostředkem, kontaktujte výrobce tohoto produktu na adrese info@imglobaldesign.com a odpovědný úřad ve vaší zemi.

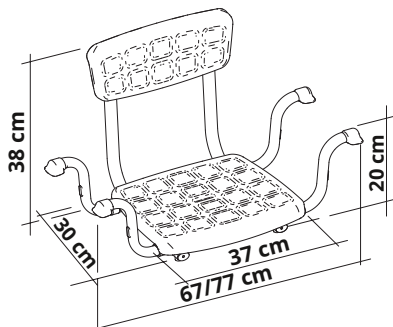

SEDAČKA DO VANY SE ZÁDOVOU OPĚRKOU

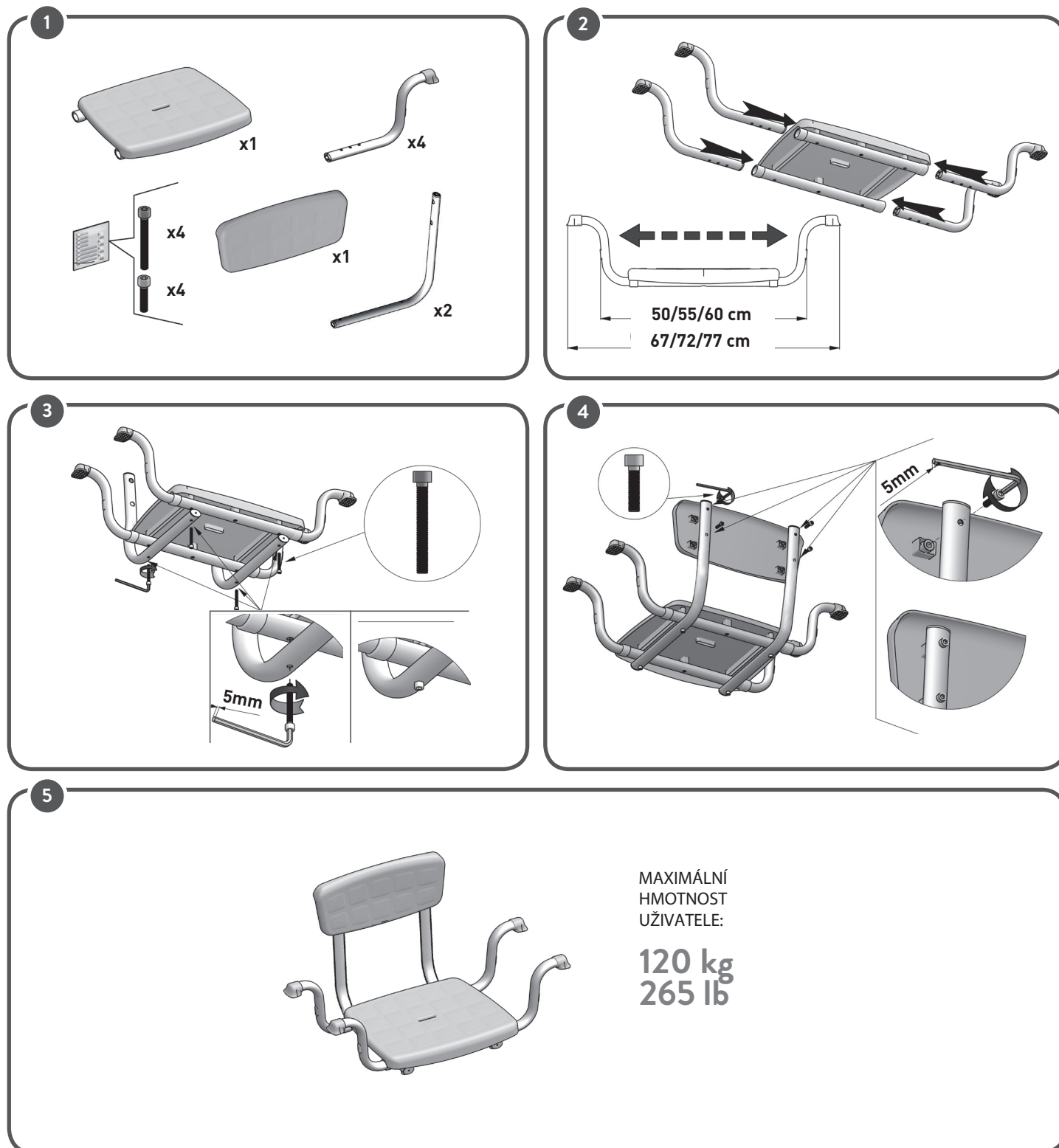

MADE IN ITALY

